


ENV-047


マウス用ワイヤレスホイール

ワイヤレスで測定可能なマウス運動量計測用回転ホイールです。ケーブル配線が必要なく、一般の飼育ケージでの計測が行えます。各 HUB(DIG-807)には、40 台までホイールを使用できます。

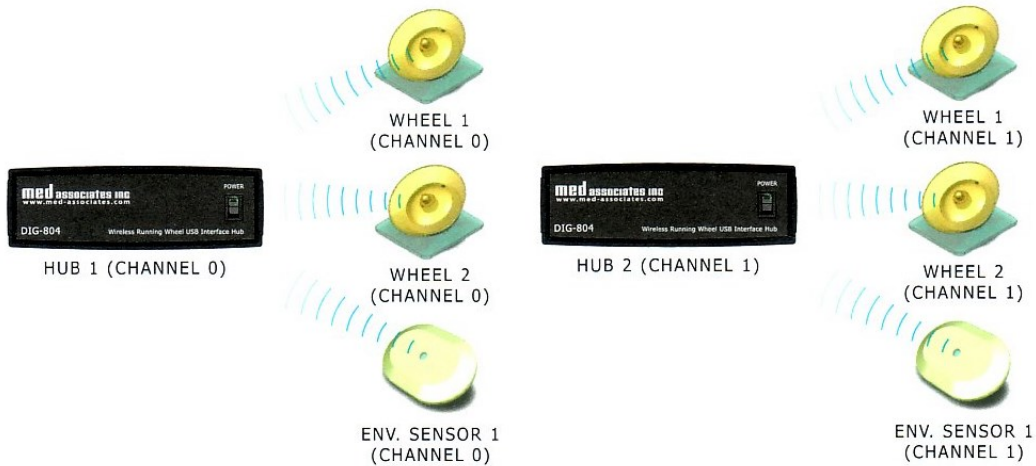


- 手頃な価格で経済的
- コンパクト・軽量
- 1 台のインターフェースで最大 40 ホイールまで接続可能
- オプションのセンサーで温度、相対湿度、光レベルを測定可能
- Excel へのデータ出力機能



■ ENV-047 ホワイヤレスホイール

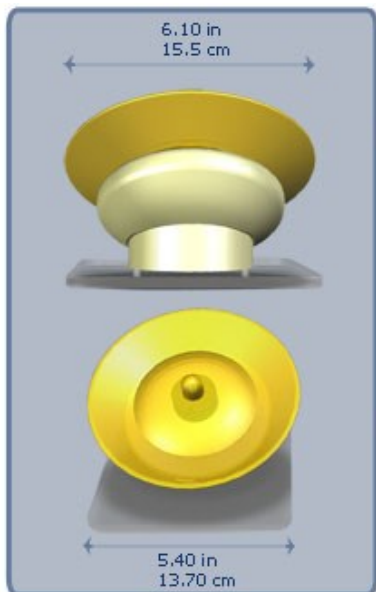

表面のホイールとワイヤレスユニットは簡単に取り外しが可能ですのでお手入れが容易に行えます。ユニットは単四電池3本で動作しますので経済的で、またメンテナンスの手間が掛かりません。

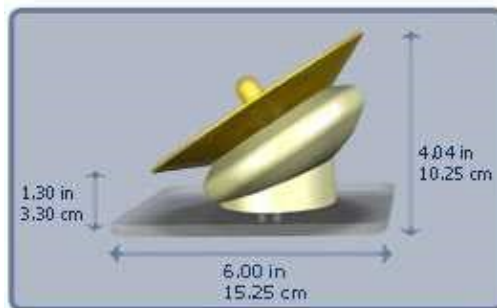

■ SOF-860 データ収録ソフト

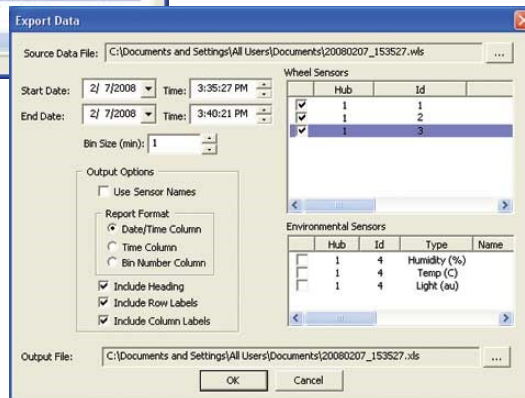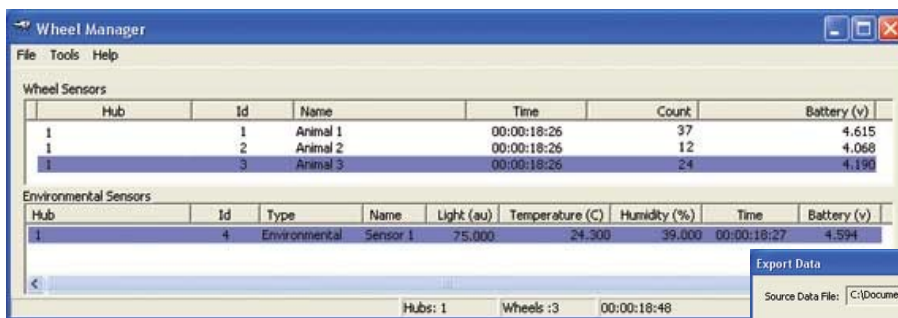

専用のソフトウェアにより、運動量(回転数)データを収録します。データは専用のファイル形式にてデータベースとして記録されます。またデータ Excel ファイル形式で出力可能で、出力範囲は任意で選択可能です。オプションの温度、相対湿度、光レベルセンサーをホイールデータと関連付けが可能です。

商 品 名	型 式
ワイヤレスホイール	ENV-047
USB インターフェイス (HUB)	DIG-807
収録ソフトウェア	SOF-860
温湿光度センサー	ENV-044E

米国 Med Associates 社
正規日本総代理店

 <http://www.neuro-s.co.jp>
NEUROSCIENCE, INC.
株式会社 ニューロサイエンス
本 社 ■〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目11-6 sales@neuro-s.co.jp
2-11-6, HONGO, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0033, JAPAN
TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350
大阪営業所 ■〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503
TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859

※弊社以外からの平行輸入商品はサポート致しかねますので、予めご承知お願い申し上げます。

販売代理店

