


フィッシュタンク各種

●3サイズ:1.5、3、10リットル ●材質:ポリカーボネート(PC) ●水槽の大きさは実験の研究用途を広げます。●立ち下がり、90%の透過率、高温&高圧滅菌に対する耐久性があり、軽量です。●積み重ね可能で、より少ない省スペースと、管理が容易です。●水が還流しやすいようにデザインされています。蓋が水の蒸発と、定常取水ホース取付等の防塵、水位の低下が少ない構造に設計されます。

- AAZ-015-AA-A型《1.5L フィッシュタンク》
- AAZ-030-AA-A型《3L フィッシュタンク》
- AAZ-100-AA-A型《10L フィッシュタンク》
- AA0-000-A12-A型《500ミクロン・スクリーンバッフル(1.5Lタンク用)》
- AA0-000-A13-A型《750ミクロン・スクリーンバッフル(1.5Lタンク用)》
- AA0-000-A10-A型《500ミクロン・スクリーンバッフル(3Lタンク用)》
- AA0-000-A11-A型《750ミクロン・スクリーンバッフル(3Lタンク用)》

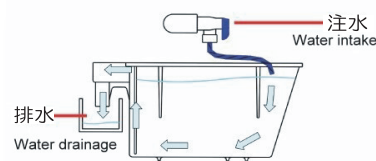


UV sterilizer and Accessories

【UV殺菌装置】

●パワー:110V・60Hz ●材質:UPVC:UVランプは、微生物に対して最大の殺菌効果を与えます。また、石英ガラススリーブに格納されていますので、交換が容易です。



●UV lamp ballast

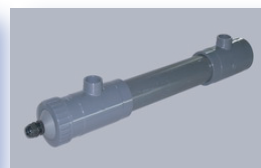

●UV lamp holder



●UV lamp tube



●Quartz socket tube



Other accessories and Filtration materials



●暖房コントローラ



●暖房スティック



●エアーポンプ



●ウォータークーラー



●バイオリジカルフィルトレーションボールは、大きな表面積と、耐摩耗性、一般的なセラミックパイオリングよりも、数倍も高い機能を性能を有します。




●石英白色フィルターは、低不純物、高強度、安定した化学的性質と、優れた濾過効果があります。



●アクティブカーボンフィルターは、高吸着臭、有機物、不純物や残留塩素を除去することができます。



●Coral gravelsは、水のpH値のバランスをとることができます。

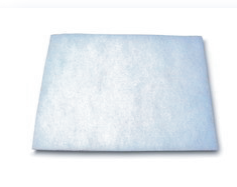

●フィルターコットンは、食べかす、排泄物や魚の死体のような大きなサイズの微粒子を、除去することができます。

*本システムは、予告なく仕様・価格を改訂する場合があります。

NEUROSCIENCE, INC.
株式会社 ニューロサイエンス
本社 ■〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目11-6 sales@neuro-s.co.jp
2-11-6, HONGO, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0033, JAPAN
TEL. 03-5840-5531 FAX. 03-5689-5350
大阪営業所 ■〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル503
TEL. 06-6391-8841 FAX. 06-6391-8859

2011/AUGUST

Zebrafish Housing System ゼブラフィッシュ飼育装置

繁殖率を高めるための、最適な水質を提供し、卓越したリサイクルシステムが特徴です。
低価格で、独特のゼブラフィッシュ飼育システムとして、また、小型硬骨魚類の飼育繁殖にも適しています。

- 自由な構成: 1.5・3・10リットル水槽が用意され、研究用途に応じて構成することが可能です。
- 高い信頼性: タッチパッド式操作パネルを用いて、水質のパラメータ設定と、モニタリングを行います。各水槽の調整バルブにて個別に水流の調整を行えます。
- 独自のセルフクリーニング方式: 水槽は常に清潔に保たれます。



【ベンチトップ型ハウジングシステム】



【ゼノバス・中型魚用ハウジングシステム】



【スタンドアローンハウジングシステム】



【明暗制御型ハウジングシステム】



【マルチ・コネクションハウジングシステム】

NEUROSCIENCE, INC.
株式会社 ニューロサイエンス
http://www.neuro-s.co.jp